



¹³C-Harnstoff-Atemtest mit 75 mg Harnstoff-Kapsel


Zum Nachweis von *Helicobacter pylori* bei Gastritis oder Antrum- bzw. Duodenalulcus oder zur Erfolgskontrolle einer Eradikationstherapie

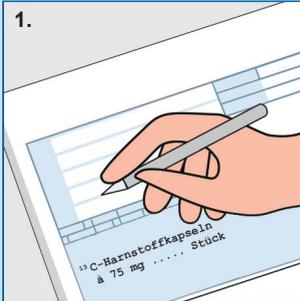


1. Privatrezept über ¹³C-Harnstoff 75 mg ausstellen und über die Apotheke liefern lassen.

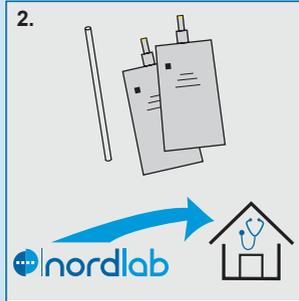


2. Wir schicken Ihnen 1 Strohhalm und 2 Atembeutel in Ihre Praxis.

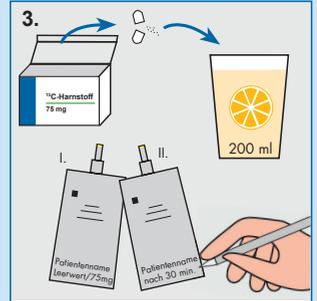


3. 75 mg Harnstoff in 200 ml Orangensaft auflösen (ggf. aus der Kapsel entnehmen). Einen Beutel mit Patientennamen und „Leerwert/75mg“ beschriften. Einen Beutel mit Patientennamen und „nach 30 min.“ beschriften. Patient muss mind. 6 Stunden nüchtern sein und darf nicht geraucht haben.

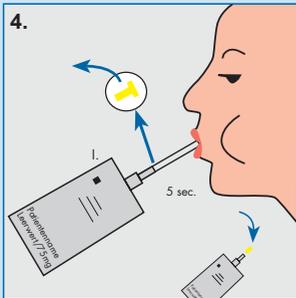

4. Gelben Stopfen vom Beutel „Leerwert/75mg“ entfernen, Strohhalm aufstecken. Der Patient pustet über diesen ca. 5 Sekunden am Ende der Ausatmungsphase in den Beutel. Anschließend den Beutel mit dem gelben Stopfen fest verschließen.

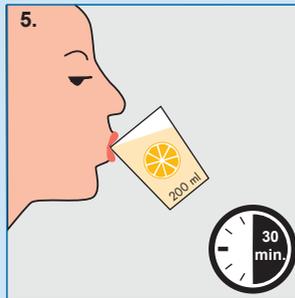

5. Patient trinkt den Orangensaft – 30 Minuten warten. In dieser Zeit darf der Patient nichts essen, trinken oder rauchen.

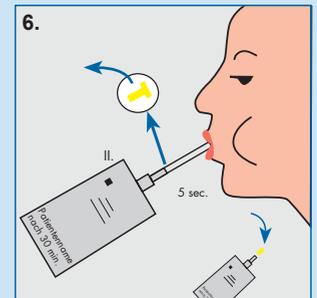


6. Gelben Stopfen vom Beutel „nach 30 min.“ entfernen, Strohhalm aufstecken. Der Patient pustet über diesen ca. 5 Sekunden am Ende der Ausatmungsphase in den Beutel. Anschließend den Beutel mit dem gelben Stopfen fest verschließen und beide Beutel ins Labor schicken.

Anleitung
50 mg


Partnerschaftspraxis für Laboratoriumsmedizin und Mikrobiologie
Falkestraße 1 · 31785 Hameln · Tel. 0 51 51/95 30-0 · Fax 0 51 51/95 30-5000
Hinterer Brühl 21 · 31134 Hildesheim · Tel. 0 51 21/93 63-0 · Fax 0 51 21/93 63-13

¹³C-Harnstoff-Atemtest mit 50 mg Harnstoff-Diabact® UBT Tablette


Zum Nachweis von *Helicobacter pylori* bei Gastritis oder Antrum- bzw. Duodenalulcus oder zur Erfolgskontrolle einer Eradikationstherapie

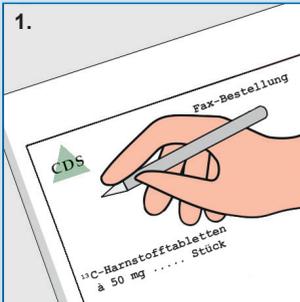


1. Bestellung von 50 mg Harnstofftablettchen beim Großhandel, z.B. bei der CDS-Versorgungs GmbH (Bestellformular kann bei uns angefordert werden.)

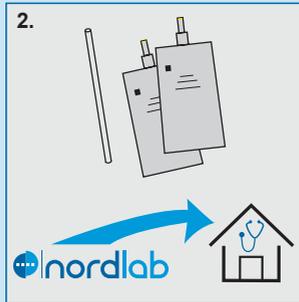

2. Wir schicken Ihnen 1 Strohhalm und 2 Atembeutel in Ihre Praxis.

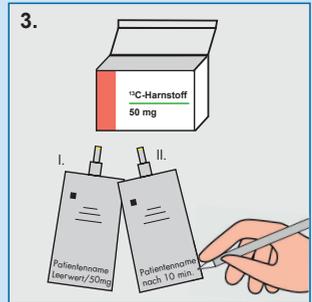


3. Einen Beutel mit Patientennamen und „Leerwert/50mg“ beschriften. Einen Beutel mit Patientennamen und „nach 10 min.“ beschriften. Patient muss mind. 6 Stunden nüchtern sein und darf nicht geraucht haben.

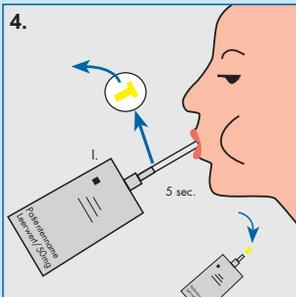

4. Gelben Stopfen vom Beutel „Leerwert/50mg“ entfernen, Strohhalm aufstecken. Der Patient pustet über diesen ca. 5 Sekunden am Ende der Ausatmungsphase in den Beutel. Anschließend den Beutel mit dem gelben Stopfen fest verschließen.



5. Patient nimmt die Tablette mit Wasser ein – 10 Minuten warten. In dieser Zeit darf der Patient nichts essen, trinken oder rauchen.

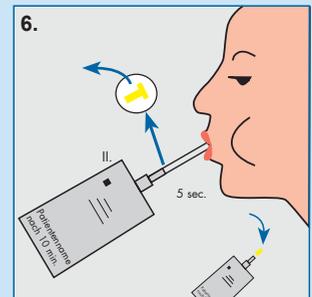

6. Gelben Stopfen vom Beutel „nach 10 min.“ entfernen, Strohhalm aufstecken. Der Patient pustet über diesen ca. 5 Sekunden am Ende der Ausatmungsphase in den Beutel. Anschließend den Beutel mit dem gelben Stopfen fest verschließen und beide Beutel ins Labor schicken.